

CGM SMART UPDATE

Stand CGM ALBIS Version Q3/2021 (21.30)



INHALT

1	CGM ALBIS - neues Online-Update-Verfahren: CGM SMART UPDATE	3
1.1	Vorteile von CGM SMART UPDATE	3
1.2	Dienste für die Nutzung von CGM SMART UPDATE.....	3
1.3	Einrichtung von CGM SMART UPDATE.....	6
1.4	Einstellungen zu CGM SMART UPDATE über den CGM SMART UPDATE CLIENT	9
1.5	Einstellungsmöglichkeiten in Ihrem CGM SMART UPDATE CLIENT für die Automatischen Updates	11
1.5.1	Manuelles Überprüfen und manuelles Herunterladen	11
1.5.2	Automatisches Prüfen und manuelles Herunterladen	15
1.5.3	Automatisches Prüfen und automatisches Herunterladen	18
1.6	Update Historie.....	22
1.7	Überspringen von Updates	23

1 CGM ALBIS - neues Online-Update-Verfahren: CGM SMART UPDATE

Mit diesem Quartalsupdate stellen wir Ihnen unser verbessertes Online-Update-Verfahren CGM SMART UPDATE zur Verfügung.

Das CGM SMART UPDATE wird unser zukünftiges, neues Online-Update. Aktuell erhalten Sie über das CGM SMART UPDATE alle CGM ALBIS Updates. Zukünftig werden wir Ihnen darüber zusätzliche Updates, wie z.B. das CGM DMP-ASSIST Update bereitstellen.

1.1 Vorteile von CGM SMART UPDATE



- Das CGM SMART UPDATE wird Ihnen ohne zusätzliche Kosten bereitgestellt.
- Sie werden automatisch über die Windows-Taskleiste über verfügbare Updates informiert (an jedem Arbeitsplatz, der sich im Internet befindet).
- Sie können den Downloadzeitpunkt für das Update individuell festlegen.
- Mit dem CGM SMART UPDATE können wir Ihnen bedarfsgerecht Updates zur Verfügung stellen.

Wichtiger Hinweis

Laden Sie bisher das CGM ALBIS ONLINEUPDATE in Ihrer Praxis herunter, dann registrieren Sie sich bitte direkt nach Einspielen des CGM ALBIS Updates Q4/2020 (20.40) im CGM eCOCKPIT für das CGM SMART UPDATE. Die Anleitung dazu ist diesem Schreiben beigelegt. Nach dem Einspielen des Updates können Sie die Anleitung ebenfalls über den Menüpunkt „? Infoseiten Dokumentationen CGM SMART UPDATE“ einsehen.

Laden Sie Ihre Onlineupdates bisher **nicht** in der Praxis herunter, senden Sie uns bitte eine kurze Information an CGMD.ALBIS.Produkt@cgm.com, damit wir Ihnen das Onlineupdate als Link zur Verfügung stellen können.

1.2 Dienste für die Nutzung von CGM SMART UPDATE


Nach dem Einspielen des Updates wird automatisch ein Dienst installiert. Dieser wird unter dem Namen `CGM_ALBIS_BACKGROUND_SERVICE` auf Ihrem Hauptrechner/Server installiert und ist für die praxisinterne Kommunikation zwischen Ihren Arbeitsplätzen und dem Server zuständig. Das bedeutet, dass dieser Dienst keinerlei Verbindung zum Internet aufbauen wird. Sobald Sie sich aktiv für die Nutzung des CGM SMART UPDATES entschieden haben, erkennen Sie diesen Dienst an einem Symbol in der Windows Taskleiste, welches auf jedem Arbeitsplatz erscheint, sobald CGM ALBIS gestartet ist. Wenn eine Verbindung zum Praxisserver hergestellt ist, dann ist dieses Icon grün gefärbt: . Eine rote Färbung  zeigt an, dass keine Verbindung zwischen Client und Hauptrechner/Server hergestellt werden konnte. Eine Ursache für das rote Icon können gesperrte Ports sein. Um diesen Dienst zu verwenden ist es erforderlich, dass verschiedene Ports in der Firewall freigegeben werden. Das CGM ALBIS Update wird diese Einstellungen einmalig bei der Dienst-Installation vornehmen. Das Setup prüft automatisch, ob die Ports 5600, 5601, 5602 und 5603 frei sind und verwendet diese für das CGM SMARTUPDATE. ACHTUNG: Dieser Automatismus greift nur, wenn die Windows eigene Firewall verwendet wird.

Sind diese Ports belegt, sucht CGM ALBIS nicht belegte Ports. Die verwendeten Ports lassen sich in der sogenannten Global INI (albisglb.ini) nachlesen. Sie stehen in der Sektion: [AlbisService] und dort hinter folgenden Einträgen: FrontendPort, FrontendServicePort, BackendPort, BackendServicePort. Diese Ports sind als ein- und ausgehende Firewallregeln am Hauptrechner/Server zu definieren.


Unbedingt beachten!

Die Global INI darf unter keinen Umständen verändert werden, da sonst der fehlerfreie Betrieb von CGM ALBIS nicht gewährleistet werden kann. Sollten Sie diese Informationen benötigen und auch nur die kleinste Unsicherheit bestehen, wenden Sie sich bitte an Ihren CGM ALBIS Vertriebs- und Servicepartner!

Falls das Symbol nicht sichtbar sein sollte, können Sie folgende Schritte durchführen, um es einzublenden. Klicken Sie in Ihrer Windows-Taskleiste mit der rechten Maustaste an eine freie Stelle und wählen Sie den Punkt **Taskleisteneinstellungen** aus.

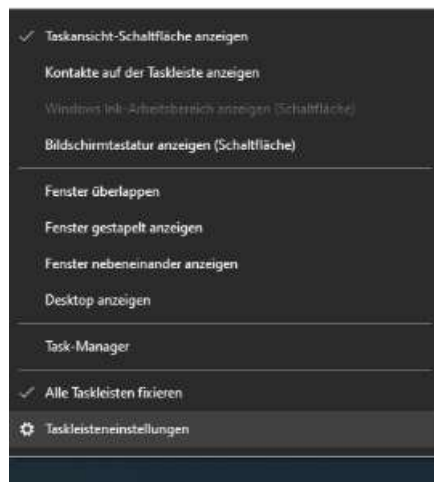

Es öffnet sich ein Einstellungs-Menü. Scrollen Sie mit dem Mausrad bis zu dem Punkt **Infobereich** und klicken Sie auf **Symbole für die Anzeige auf der Taskleiste auswählen**.

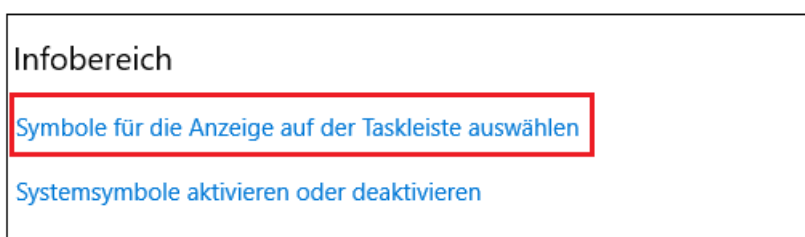

Um das Symbol für den ALBIS Service in Ihrer Taskleiste anzuzeigen, setzen Sie den Schalter neben dem Symbol auf **Ein**.



Wichtiger Hinweis:

Dieser Dienst ermöglicht es Ihnen, im CGM SMART UPDATE-Verfahren zu signalisieren, dass ein Download abgeschlossen ist. Zukünftig wird dieser Dienst für zusätzliche Funktionalitäten, unabhängig vom CGM SMART UPDATE, verwendet, so dass eine fehlerfreie Funktionsweise sichergestellt sein sollte.

Mit dem Einspielen Ihres CGM ALBIS Updates wird auch ein weiterer Dienst automatisch installiert, welcher die Online-Verbindung zu den SMART UPDATE Servern zwecks Kommunikation und Download von Update Paketen herstellt. Der Dienst läuft auf dem Hauptrechner/Server und heißt im Standard `CGM_ALBIS_SMARTUPDATE_SERVICE`. Im inaktiven Zustand hat der Dienst keinerlei Kommunikation zu den CGM SMART UPDATE Servern. Der Dienst zum CGM SMART UPDATE kommuniziert erst mit den CGM SMART UPDATE Servern, sobald Sie im Zuge der Registrierung der Datenschutzerklärung zugestimmt haben.


Wichtiger Hinweis

Damit der Dienst `CGM_ALBIS_SMARTUPDATE_SERVICE` einwandfrei funktioniert, muss der Port 47831 (ein- und ausgehend) in der Firewall freigegeben werden. Das CGM ALBIS Update wird diese Einstellungen einmalig bei der Dienst-Installation automatisch vornehmen. ACHTUNG: Dieser Automatismus greift nur, wenn die Windows eigene Firewall verwendet wird. Verwenden Sie eine andere Software- oder Hardwarefirewall, muss der o.g. Port manuell nachgetragen werden.

Sie erkennen den Dienst an folgendem Symbol in der Windows Taskleiste: 

Dieses Symbol wird automatisch in Ihrer Windows Taskleiste eingeblendet, sobald Sie das CGM SMART UPDATE erfolgreich eingerichtet haben. Sollten Sie folgende Einstellung für Ihre Windows Taskleiste vorgenommen haben



wird das Symbol für den CGM SMART UPDATE Dienst automatisch hinter dem eingeblendeten Pfeil angezeigt:  und kann nicht dauerhaft einzeln eingeblendet werden.


Sollten Sie folgende Einstellung für Ihre Windows Taskleiste vorgenommen haben



wird das Symbol für den CGM SMART UPDATE Dienst automatisch neben den weiteren Icons in Ihrer Windows Taskleiste angezeigt.


1.3 Einrichtung von CGM SMART UPDATE

Im Laufe des Quartals wird Ihnen folgende Hinweismeldung zu der neuen Funktionalität des CGM SMART UPDATES angezeigt:

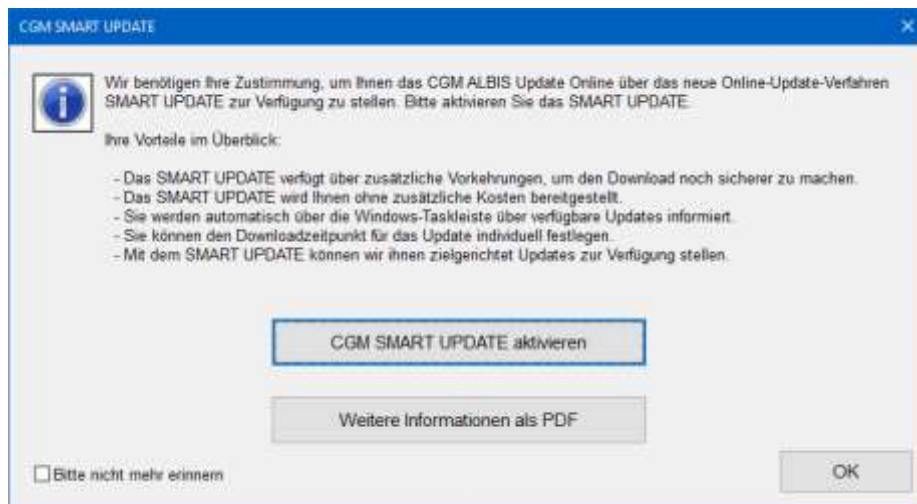

Um weitere Informationen über CGM SMART UPDATE zu erhalten, klicken Sie auf die Schaltfläche `Weitere Informationen als PDF`.

Um CGM SMART UPDATE einzurichten, klicken Sie auf die Schaltfläche `CGM SMART UPDATE aktivieren`. Es öffnet sich der Arztwahl-Dialog. Wählen Sie dort den entsprechenden Arzt aus und bestätigen Sie mit `OK`.

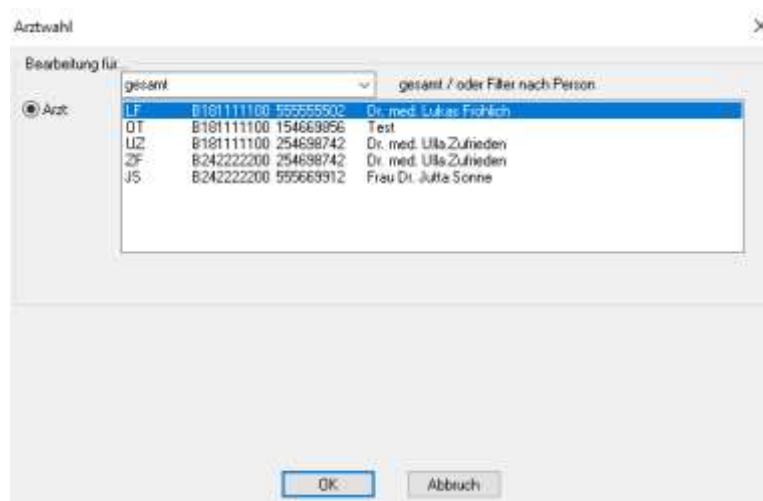


Sie werden automatisch in das CGM eCOCKPIT weitergeleitet.

Sie haben auch ohne die o.a. Meldung jederzeit die Möglichkeit, das CGM SMART UPDATE einzurichten. Klicken Sie im CGM ALBIS Menü auf *Extern CGM eCOCKPIT*. Alternativ klicken Sie




in CGM ALBIS auf die Schaltfläche *CGM eCOCKPIT öffnen* (zum Einblenden des Icons machen Sie einen Rechtsklick in der CGM ALBIS Funktionsleiste. Unter *Anpassen Nachrichten* finden Sie das entsprechende Symbol).


Es öffnet sich der Arztwahl-Dialog. Wählen Sie dort den entsprechenden Arzt aus und bestätigen Sie mit *OK*.

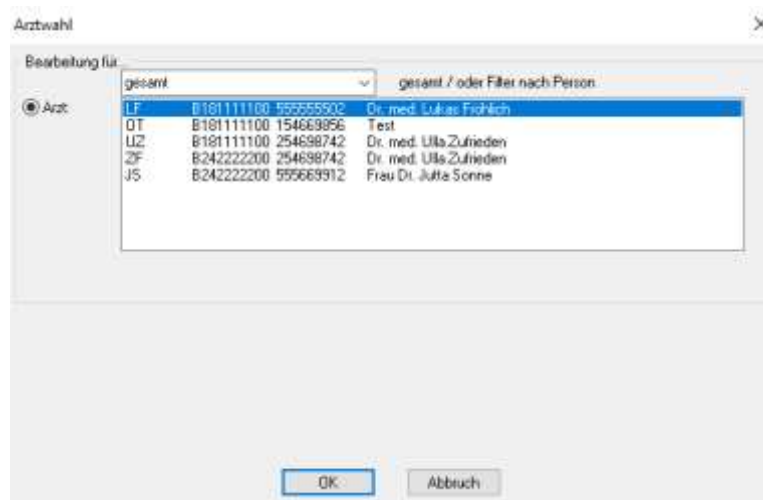


CGM ALBIS eCOCKPIT öffnet sich. Klicken Sie in der Menüleiste am linken Rand auf den Punkt CGM SMART UPDATE. Um die Einrichtung zu starten, klicken Sie auf die grüne Schaltfläche *Einrichtung-Assistent starten*.

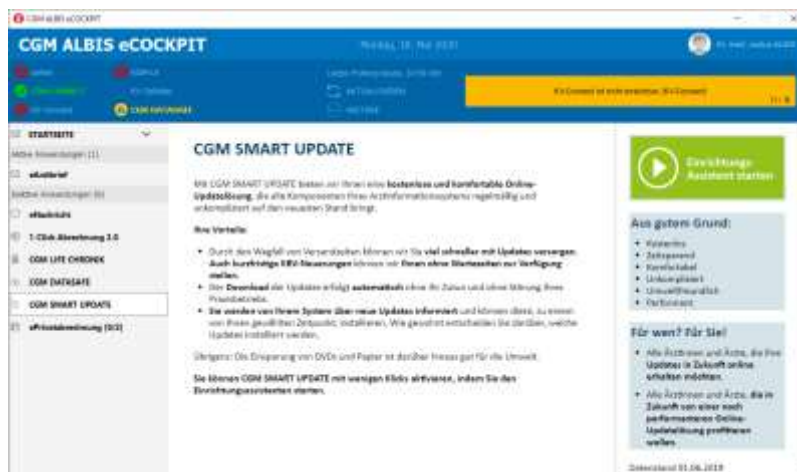

Daraufhin öffnet sich der Einrichtungs-Assistent:

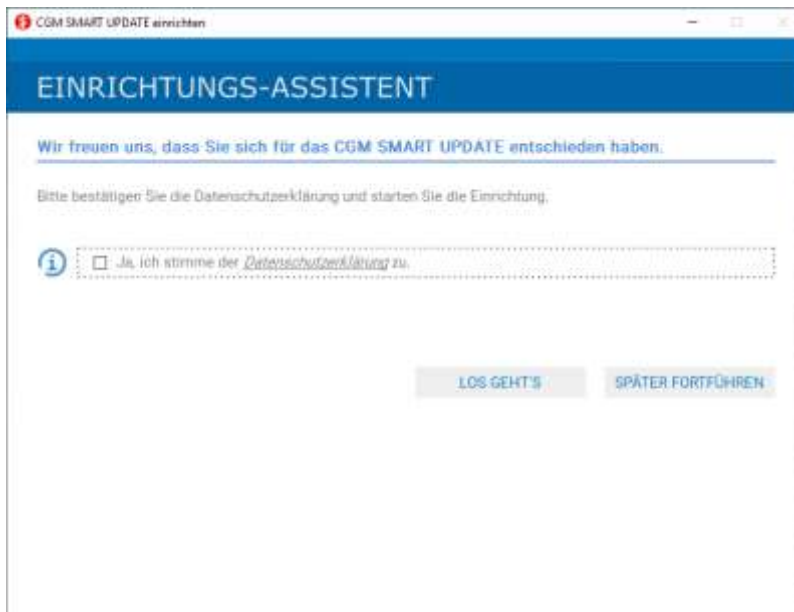

Um Informationen zum Datenschutz zu erhalten, klicken Sie auf den Link zur Datenschutzerklärung. Bestätigen Sie die Datenschutzerklärung, indem Sie einen Haken in dem Feld Ja, ich stimme der Datenschutzerklärung zu setzen und bestätigen Sie Ihre Aktion mit LOS GEHT'S.

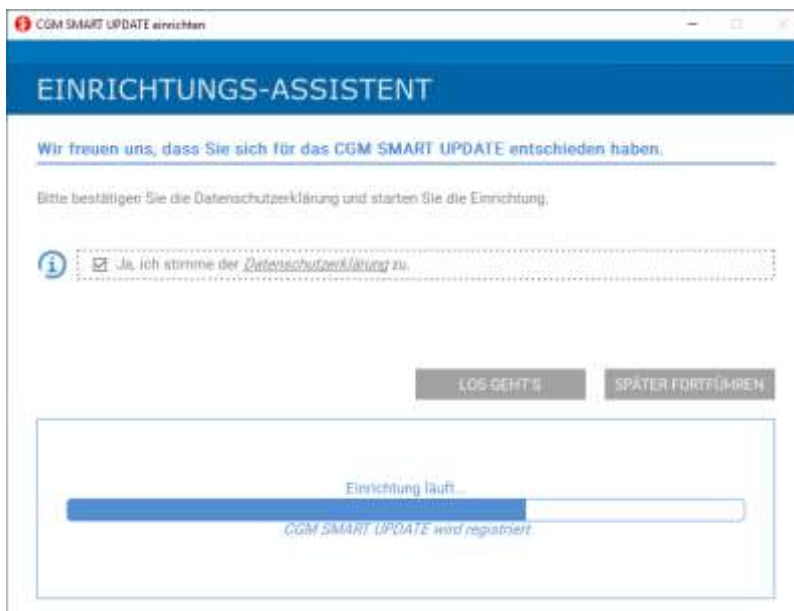


Sobald die Einrichtung erfolgreich abgeschlossen wurde, wird Ihnen dies mit der folgenden Meldung bestätigt:




Ihre Praxis ist nun für CGM SMART UPDATE freigeschaltet und CGM SMART UPDATE ist ab sofort an jedem Arbeitsplatz in Ihrer Praxis, der sich im Internet befindet, verfügbar.

Wenn Sie den Einrichtungs-Assistenten schließen, sehen Sie, dass CGM SMART UPDATE im CGM ALBIS eCOCKPIT aktiviert wurde (es befindet sich nicht mehr unter den inaktiven Anwendungen, sondern unter den aktiven Anwendungen).

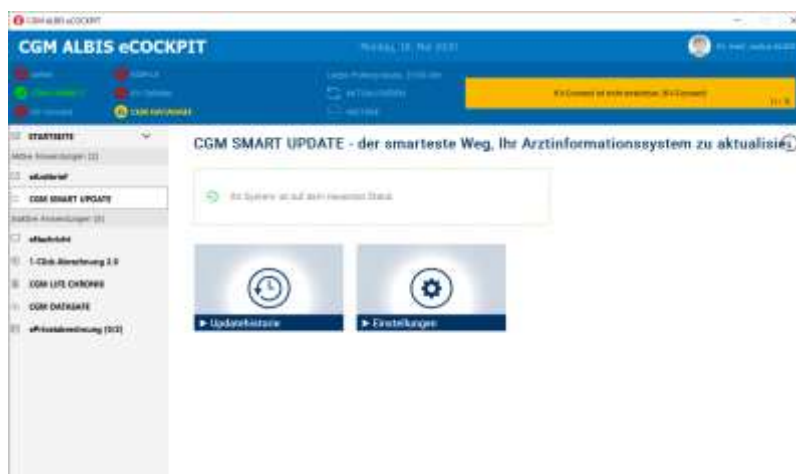


1.4 Einstellungen zu CGM SMART UPDATE über den CGM SMART UPDATE CLIENT

Wählen Sie im CGM ALBIS eCOCKPIT unter den aktiven Diensten CGM SMART UPDATE aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **Einstellungen** (s. rote Markierung):

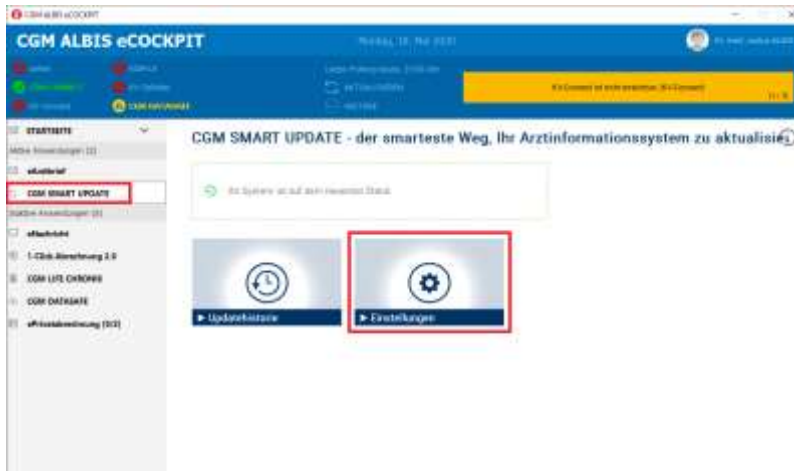

Sie gelangen in Ihren CGM SMART UPDATE CLIENT:

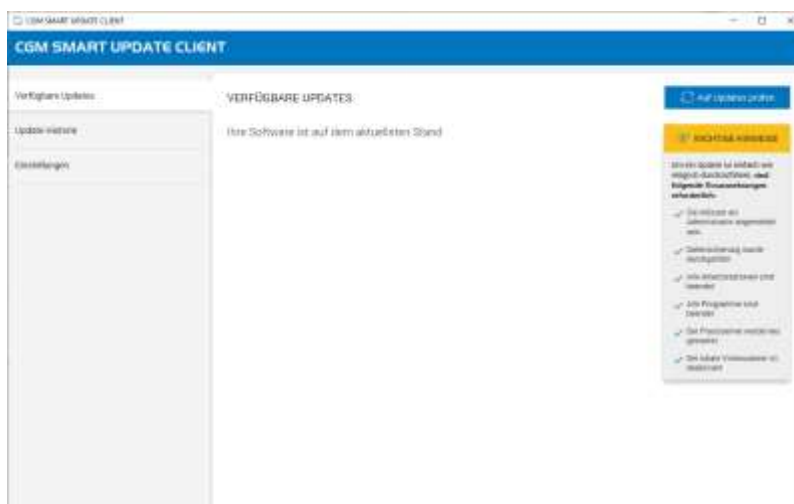

In der Menüleiste an der linken Seite können Sie verschiedene Ansichten auswählen, deren Bedeutung wir Ihnen im Folgenden erklären:


1.5 Einstellungsmöglichkeiten in Ihrem CGM SMART UPDATE CLIENT für die Automatischen Updates

Über den Menüpunkt *Einstellungen*, können verschiedene Einstellungen zum Herunterladen eines Updates ausgewählt werden:

- Manuelles Überprüfen und manuelles Herunterladen
- Automatisches Prüfen und manuelles Herunterladen
- Automatisches Prüfen und automatisches Herunterladen

Im Folgenden erklären wir Ihnen alle 3 Einstell-Möglichkeiten. Bitte stellen Sie die, für Sie am besten geeignete, Variante ein. Den vollen Komfort des neuen CGM SMART UPDATES erhalten Sie über die Einstellung "Automatisches Prüfen und automatisches Herunterladen".

1.5.1 Manuelles Überprüfen und manuelles Herunterladen

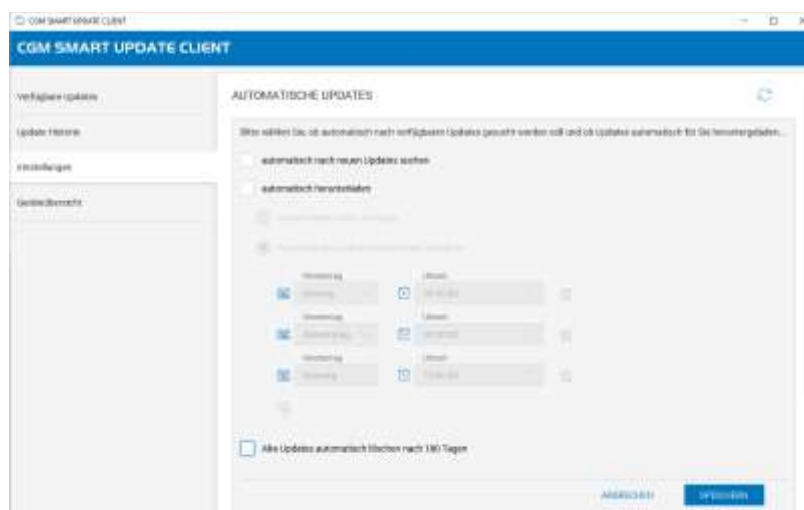


Es wurden folgende Einstellungen getätigt:


- automatisch nach neuen Updates suchen ist inaktiv (keine Auswahl getroffen)
- automatisch herunterladen ist inaktiv (keine Auswahl getroffen)

Mit diesen Einstellungen sucht der CGM SMART UPDATE CLIENT nicht automatisch nach neuen Updates. Möchten Sie wissen, ob neue Updates verfügbar sind, können Sie dies im Menüpunkt

Verfügbare Updates über das Icon zur Aktualisierung  anfragen.

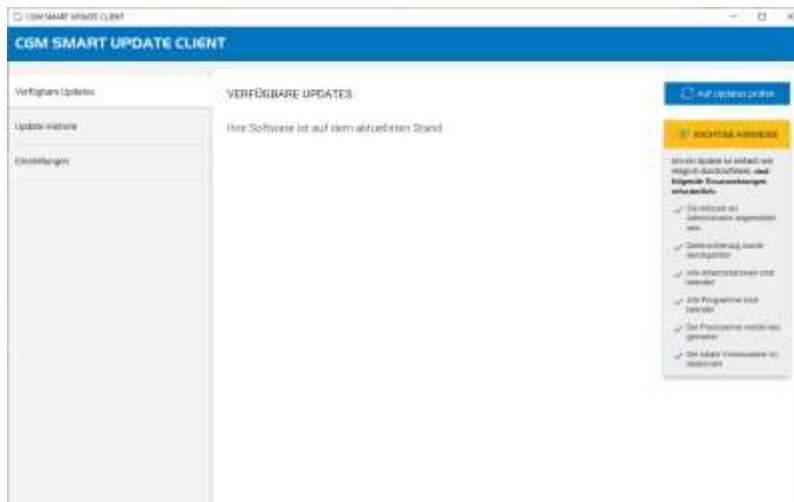

Sollte ein Update zum Herunterladen zur Verfügung stehen, wird dies in der Oberfläche unter dem Menüpunkt *Verfügbare Updates* angezeigt:

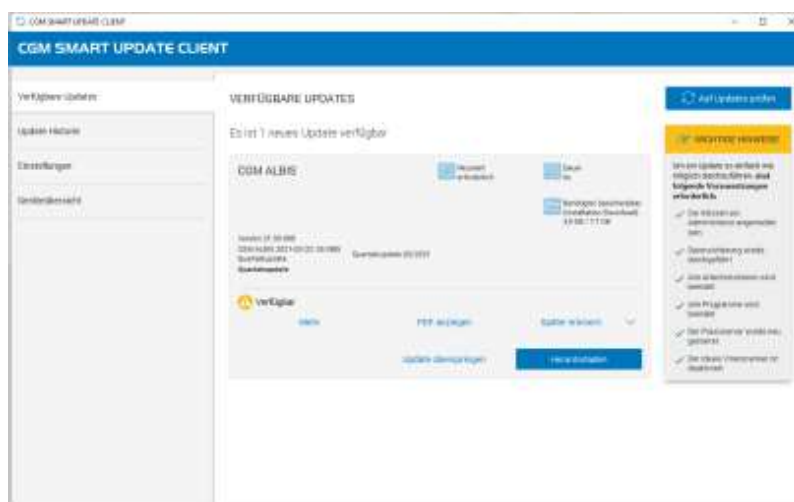

Wichtiger Hinweis:

Öffnen Sie bitte unbedingt vor dem Einspielen des CGM ALBIS Updates das Anschreiben über die Schaltfläche *PDF anzeigen* und lesen Sie dies aufmerksam durch, da ggf. wichtige Informationen zum Update hinterlegt sind. Klicken Sie bitte ebenfalls auf die Schaltfläche *Mehr* und lesen Sie alle dort enthaltenen Informationen und Dokumente (Installationsanleitung, Programmdokumentation und ggf. weitere Hinweise) vor dem Einspielen eines CGM ALBIS Updates aufmerksam durch, da auch hier ggf. wichtige Informationen zum Update hinterlegt sind, und informieren Sie bei Bedarf das Praxispersonal.

Unter dem Punkt *Später erinnern* können Sie sich erinnern lassen, das Update zu einem späteren Zeitpunkt herunterzuladen.


Hinweis


Die Angabe, ob ein Neustart erforderlich ist, hängt unter Umständen von der jeweiligen Situation in Ihrer Praxis ab, so dass z.B. auch bei der Angabe, dass kein Neustart erforderlich ist, evtl. ein Neustart erforderlich sein kann. Folgen Sie daher in diesem Fall bitte immer den Installations-Hinweisen. Die Angabe der Einspieldauer des Updates ist eine ungefähre Angabe anhand eines "durchschnittlichen Systems". Das bedeutet, dass die Einspieldauer von den Praxisgegebenheiten abhängt und somit entweder kürzer, oder aber auch länger sein kann.

Über die Schaltfläche **Herunterladen** starten Sie den Download-Vorgang und das Update wird auf Ihrem Hauptrechner/Server in den Ordner *ALBIS - Update* heruntergeladen.

Hinweis

Es kann bis zu 10 Minuten dauern, bis der Download-Vorgang gestartet wird. Sie erkennen den Start des Downloads anhand eines Fortschrittsbalkens.

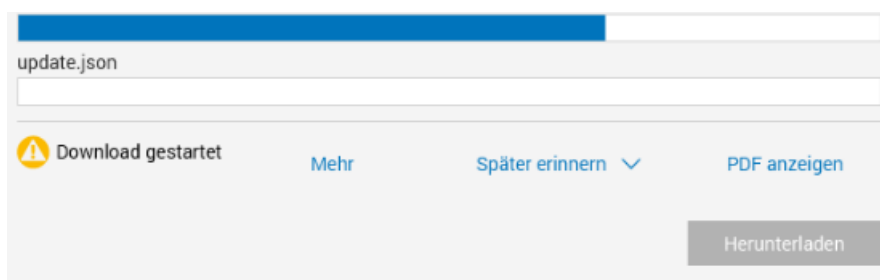

Nach erfolgreichem Download eines Updates erfolgt eine Anzeige über das folgende Icon in Ihrer Windows-Taskleiste:  Wenn Sie mit dem Mauszeiger über das Icon steuern, werden die Updates aufgelistet, die zur Installation bereitstehen.

Es stehen 2 neue Updates zur Verfügung:
CGM ALBIS 2020 Q4 (20.40.007) Demoupdate
CGM ALBIS 2020 Q4 (20.40.025) Korrekturupdate

Sie können das Update / die Updates nun auf Ihrem Praxis-Server installieren. Klicken Sie dazu die Hinweismeldung an, es öffnet sich automatisch das CGM ALBIS-Updateverzeichnis.

Wählen Sie ein Update aus und starten Sie mit einem Doppelklick den Installationsprozess. Bitte beachten Sie, dass vor dem Einspielen des CGM ALBIS Updates, wie gewohnt, CGM ALBIS an allen Arbeitsplätzen geschlossen sein muss.


Wichtiger Hinweis

Befinden Sie sich an einem Arbeitsplatz, der sich nicht auf dem Hauptrechner/Server befindet, erhalten Sie lediglich eine Hinweismeldung, die Ihnen beschreibt, dass Sie das verfügbare Update nun an Ihrem Hauptrechner/Server einspielen können.




Sie haben weiterhin die Möglichkeit, das Update auch manuell über den Update Ordner auf dem Hauptrechner/Server zu installieren.

Ob das Update bereits heruntergeladen ist, erkennen Sie auch zusätzlich (optional) an der veränderten Schaltfläche in Ihrem CGM SMART UPDATE Client in dem Menü **Update Historie**. Sie sehen dort einen grünen Haken neben dem Wort **Download**.

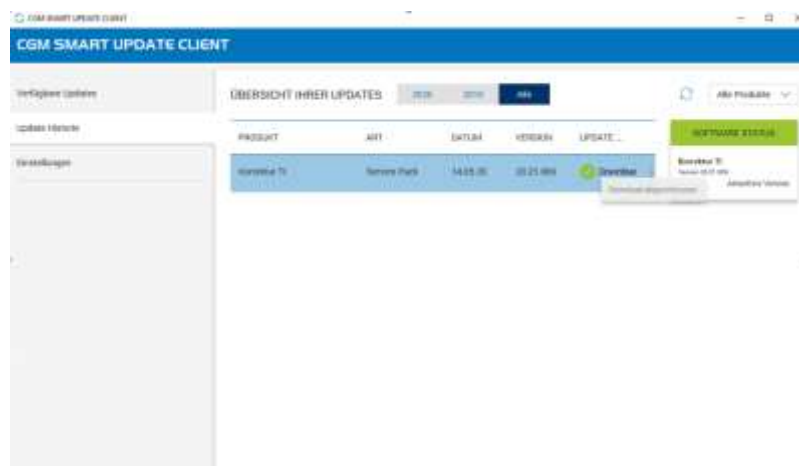

1.5.2 Automatisches Prüfen und manuelles Herunterladen

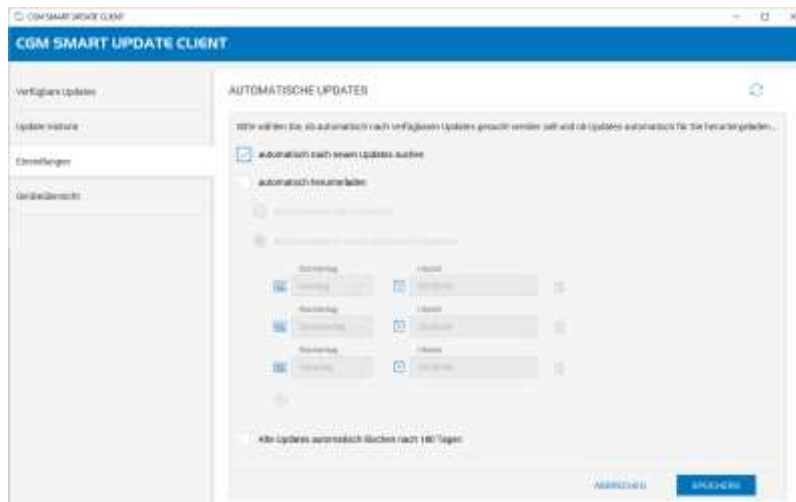



Es wurden folgende Einstellungen getätigt:

- automatisch nach neuen Updates suchen ist aktiv
- automatisch herunterladen ist inaktiv (keine Auswahl getroffen)

Um Ihre Einstellungen zu bestätigen, klicken Sie auf die Schaltfläche **SPEICHERN**.

Wenn Sie den Punkt **automatisch nach neuen Updates suchen** auswählen, erhalten Sie

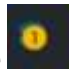eine Benachrichtigung über eine Anzeige in Ihrer Windows-Taskleiste , sobald ein neues Update zur Verfügung steht. Mit einem Klick auf das Symbol gelangen Sie automatisch in den CGM SMART UPDATE Client in den Menüpunkt **Verfügbare Updates**, wo Ihnen nun die zum Download verfügbaren Updates angezeigt werden:

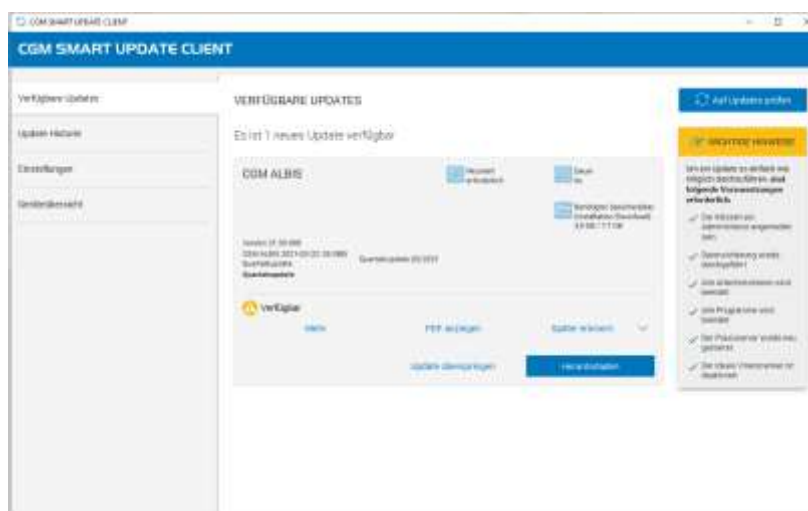

Wichtiger Hinweis:

Öffnen Sie bitte unbedingt vor dem Einspielen des CGM ALBIS Updates das Anschreiben über die Schaltfläche *PDF anzeigen* und lesen Sie dies aufmerksam durch, da ggf. wichtige Informationen zum Update hinterlegt sind. Klicken Sie bitte ebenfalls auf die Schaltfläche *Mehr* und lesen Sie alle dort enthaltenen Informationen und Dokumente (Installationsanleitung, Programmdokumentation und ggf. weitere Hinweise) vor dem Einspielen eines CGM ALBIS Updates aufmerksam durch, da auch hier ggf. wichtige Informationen zum Update hinterlegt sind, und informieren Sie bei Bedarf das Praxispersonal.

Unter dem Punkt *Später erinnern* können Sie sich erinnern lassen, das Update zu einem späteren Zeitpunkt herunterzuladen.


Hinweis


Die Angabe, ob ein Neustart erforderlich ist, hängt unter Umständen von der jeweiligen Situation in Ihrer Praxis ab, so dass z.B. auch bei der Angabe, dass kein Neustart erforderlich ist, evtl. ein Neustart erforderlich sein kann. Folgen Sie daher in diesem Fall bitte immer den Installations-Hinweisen. Die Angabe der Einspieldauer des Updates ist eine ungefähre Angabe anhand eines "durchschnittlichen Systems". Das bedeutet, dass die Einspieldauer von den Praxisgegebenheiten abhängt und somit entweder kürzer, oder aber auch länger sein kann.

Über die Schaltfläche *Herunterladen* starten Sie den Download-Vorgang und das Update wird auf Ihrem Hauptrechner/Server in den Ordner *ALBIS - Update* heruntergeladen.

Hinweis

Es kann bis zu 10 Minuten dauern, bis der Download-Vorgang gestartet wird. Sie erkennen den Start des Downloads anhand eines Fortschrittsbalkens.

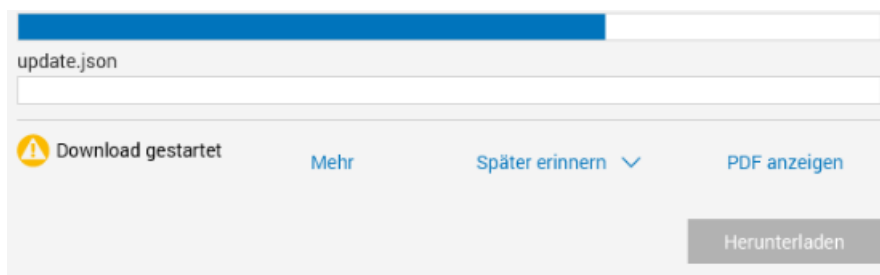

Nach erfolgreichem Download eines Updates erfolgt eine Anzeige über das folgende Icon in Ihrer Windows-Taskleiste:  Wenn Sie mit dem Mauszeiger über das Icon steuern, werden die Updates aufgelistet, die zur Installation bereitstehen.

Es stehen 2 neue Updates zur Verfügung:
CGM ALBIS 2020 Q4 (20.40.007) Demoupdate
CGM ALBIS 2020 Q4 (20.40.025) Korrekturupdate

Sie können das Update / die Updates nun auf Ihrem Praxis-Server installieren. Klicken Sie dazu die Hinweismeldung an, es öffnet sich automatisch das CGM ALBIS-Updateverzeichnis.

Wählen Sie ein Update aus und starten Sie mit einem Doppelklick den Installationsprozess. Bitte beachten Sie, dass vor dem Einspielen des CGM ALBIS Updates, wie gewohnt, CGM ALBIS an allen Arbeitsplätzen geschlossen sein muss.


Wichtiger Hinweis:

Befinden Sie sich an einem Arbeitsplatz, der sich nicht auf dem Hauptrechner/Server befindet, erhalten Sie lediglich eine Hinweismeldung, die Ihnen beschreibt, dass Sie das verfügbare Update nun an Ihrem Hauptrechner/Server einspielen können.




Sie haben weiterhin die Möglichkeit, das Update auch manuell über den Update Ordner auf dem Hauptrechner/Server zu installieren.

Ob das Update bereits heruntergeladen ist, erkennen Sie auch zusätzlich (optional) an der veränderten Schaltfläche in Ihrem CGM SMART UPDATE Client in dem Menü **Update Historie**. Sie sehen dort einen grünen Haken neben dem Wort **Download**.

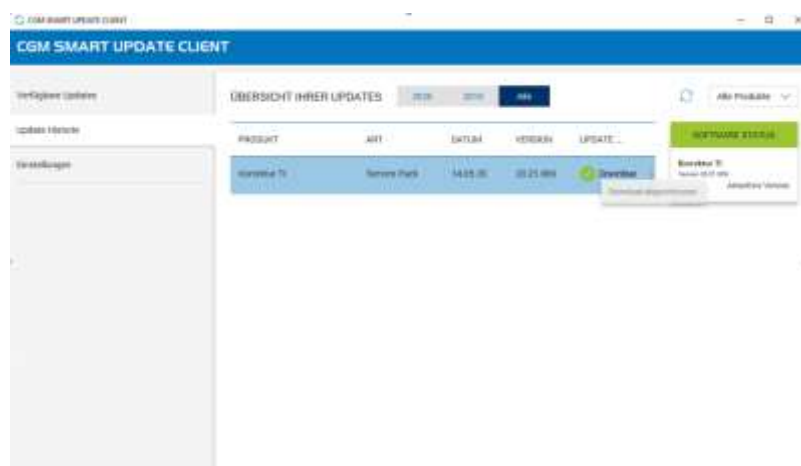



1.5.3 Automatisches Prüfen und automatisches Herunterladen

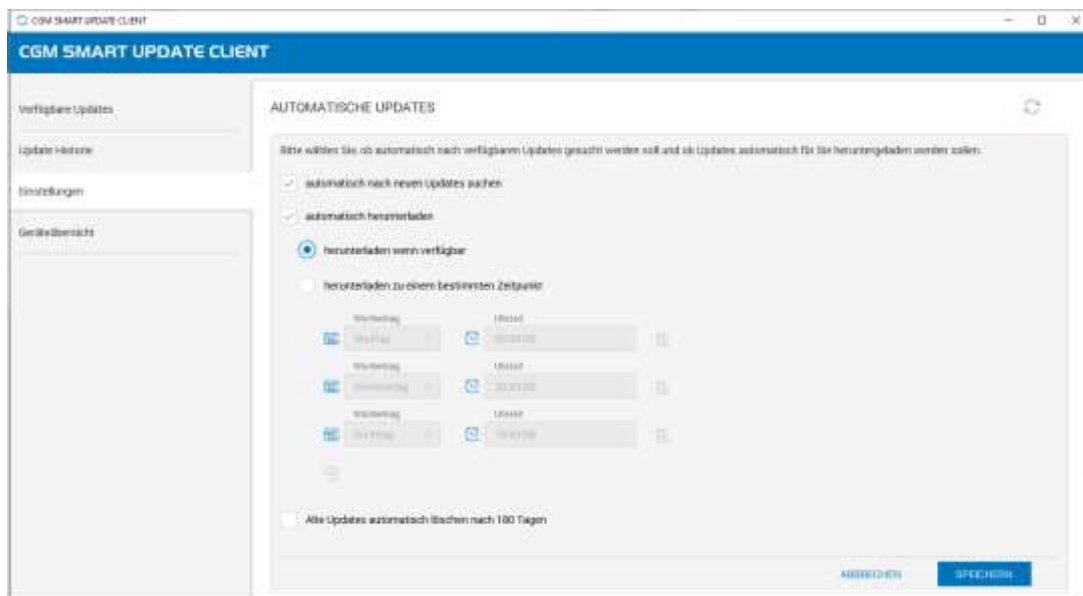

Es wurden folgende Einstellungen getätigt:


- automatisch nach neuen Updates suchen ist aktiv
Sie erhalten zeitnah die Information, wenn ein CGM ALBIS Update für Sie bereitsteht.
- automatisch herunterladen ist aktiv
 - herunterladen wenn verfügbar: Das Update wird sofort heruntergeladen werden, wenn es verfügbar ist.

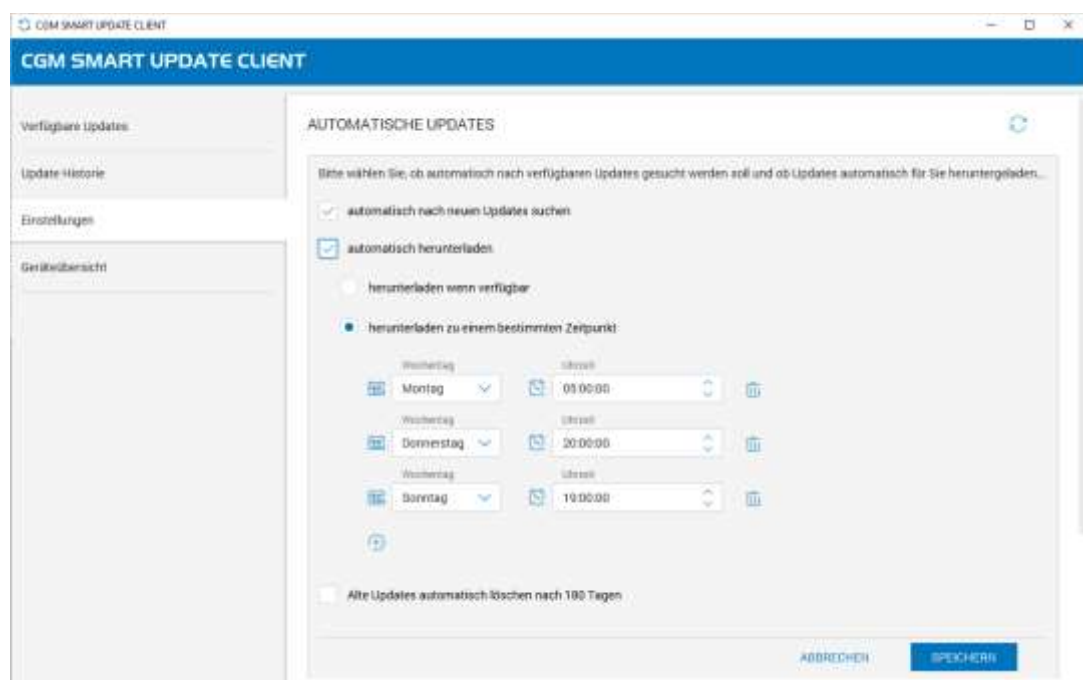

- automatisch heruntergeladen ist aktiv
 - herunterladen zu einem bestimmten Zeitpunkt: Bestimmen Sie selbst, an welchen Wochentagen und zu welchen Uhrzeiten bevorzugt Updates heruntergeladen werden sollen. Stellen Sie die gewünschten Wochentage und die gewünschten Uhrzeiten manuell ein. Über das  Symbol haben Sie die Möglichkeit, weitere Wochentage und Uhrzeiten hinzuzufügen. So können Sie Ihr Update auch außerhalb Ihrer Praxis-Öffnungszeiten automatisch heruntergeladen. Bitte bedenken Sie bei dieser Einstellung allerdings, dass zwischen der Verfügbarkeit eines Updates und dem Herunterladen des Updates bei dieser Einstellung ggf. bis zu 6 Werktagen liegen können. Somit ist es ggf. ratsam, falls notwendig, das CGM ALBIS Update bereits vorher manuell herunterzuladen.
- Alte Updates automatisch löschen nach 180 Tagen
Mit dieser Option werden alte Updates automatisch nach 180 Tagen gelöscht.

Um Ihre Einstellungen zu bestätigen, klicken Sie auf die Schaltfläche **SPEICHERN**.

Bevor Sie das Update einspielen, lesen Sie sich bitte alle Informationen zum Update durch. Diese erhalten Sie, wenn das Update noch nicht eingespielt ist über das Menü *Verfügbare Updates*:

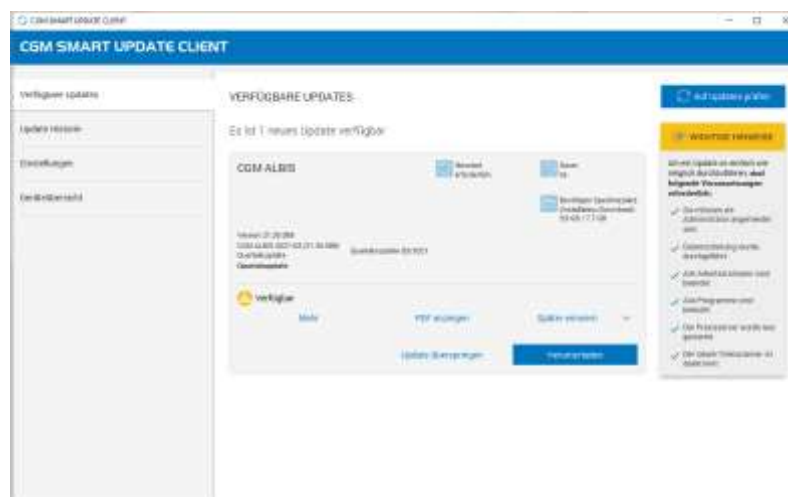

Wichtiger Hinweis:

Öffnen Sie bitte unbedingt vor dem Einspielen des CGM ALBIS Updates das Anschreiben über die Schaltfläche *PDF anzeigen* und lesen Sie dies aufmerksam durch, da ggf. wichtige Informationen zum Update hinterlegt sind. Klicken Sie bitte ebenfalls auf die Schaltfläche *Mehr* und lesen Sie alle dort enthaltenen Informationen und Dokumente (Installationsanleitung, Programmdokumentation und ggf. weitere Hinweise) vor dem Einspielen eines CGM ALBIS Updates aufmerksam durch, da auch hier ggf. wichtige Informationen zum Update hinterlegt sind, und informieren Sie bei Bedarf das Praxispersonal.

Hinweis

Die Angabe, ob ein Neustart erforderlich ist, hängt unter Umständen von der jeweiligen Situation in Ihrer Praxis ab, so dass z.B. auch bei der Angabe, dass kein Neustart erforderlich ist, evtl. ein Neustart erforderlich sein kann. Folgen Sie daher in diesem Fall bitte immer den Installations-Hinweisen. Die


Angabe der Einspieldauer des Updates ist eine ungefähre Angabe anhand eines "durchschnittlichen Systems". Das bedeutet, dass die Einspieldauer von den Praxisgegebenheiten abhängt und somit entweder kürzer, oder aber auch länger sein kann.

Falls Sie das Update manuell herunterladen möchten, starten Sie den Download-Vorgang über die Schaltfläche **Herunterladen** und das Update wird auf Ihrem Hauptrechner/Server in den Ordner *ALBIS - Update* heruntergeladen.

Hinweis

Es kann bis zu 10 Minuten dauern, bis der Download-Vorgang gestartet wird. Sie erkennen den Start des Downloads anhand eines Fortschrittsbalkens.

Schließen Sie über das x den SMART UPDATE CLIENT. Das Update wird jetzt gemäß Ihren Einstellungen heruntergeladen.


Nach erfolgreichem Download eines Updates erfolgt eine Anzeige über das folgende Icon in Ihrer Windows-Taskleiste:  Wenn Sie mit dem Mauszeiger über das Icon steuern, werden die Updates aufgelistet, die zur Installation bereitstehen.

Es stehen 2 neue Updates zur Verfügung:
CGM ALBIS 2020 Q4 (20.40.007) Demoupdate
CGM ALBIS 2020 Q4 (20.40.025) Korrekturupdate

Sie können das Update / die Updates nun auf Ihrem Praxis-Server installieren. Klicken Sie dazu die Hinweismeldung an, es öffnet sich automatisch das CGM ALBIS-Updateverzeichnis.


Wählen Sie ein Update aus und starten Sie mit einem Doppelklick den Installationsprozess. Bitte achten Sie beim Einspielen der zur Verfügung stehenden Updates auf die korrekte Installationsreihenfolge.

Wichtiger Hinweis:
Befinden Sie sich an einem Client-Arbeitsplatz, erhalten Sie lediglich eine Hinweismeldung, die Ihnen beschreibt, dass Sie das verfügbare Update nun an Ihrem Praxisserver einspielen können.



Sie haben weiterhin die Möglichkeit das Update auch manuell über den Update Ordner auf dem Hauptrechner/Server zu installieren.

Ob das Update bereits heruntergeladen ist, erkennen Sie auch zusätzlich (optional) an der veränderten Schaltfläche in Ihrem CGM SMART UPDATE Client in dem Menü `Update Historie`. Sie sehen dort einen grünen Haken neben dem Wort `Download`.

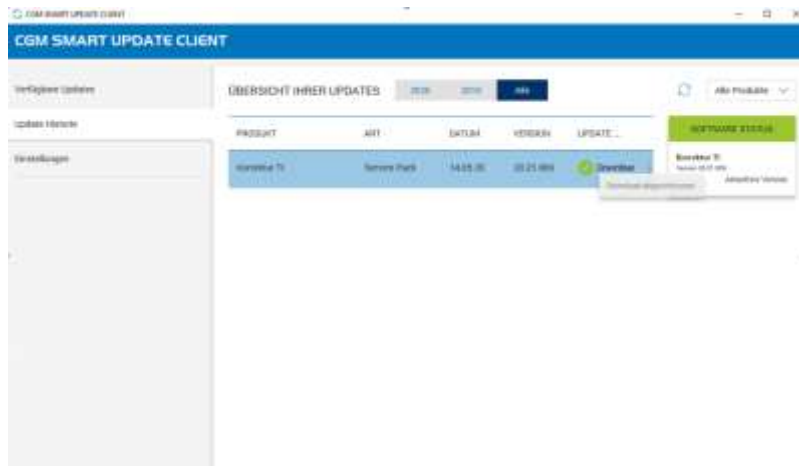

1.6 Update Historie

Unter dem Menüpunkt `Update Historie` in Ihrem CGM SMART UPDATE CLIENT finden Sie alle Updates, die Sie in der Vergangenheit installiert haben.


In der oberen Zeile können Sie nach verschiedenen Jahren filtern, indem Sie eine der Schaltflächen anwählen. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, sich über die Schaltfläche `Alle` die Gesamtzahl der heruntergeladenen Updates anzeigen lassen. Über die Auswahlliste `Alle Produkte` haben Sie ebenfalls die Option, nach verschiedenen Produkten zu filtern.



CGM SMART UPDATE ist nach der Einrichtung an jedem Arbeitsplatz, der über einen Internetanschluss verfügt, in Ihrer Praxis verfügbar.

1.7 Überspringen von Updates

Die neue Version von CGM SMART UPDATE ermöglicht Ihnen, Updates zu überspringen und somit nicht herunter zu laden bzw. zu installieren. Wenn Sie sich zum Überspringen entscheiden, wird das betroffene Update nicht länger bei den verfügbaren Updates, sondern in der Update Historie angezeigt. Auch in der Symbolleiste wird die Zahl der verfügbaren Updates entsprechend reduziert. Aus der Update Historie heraus kann der Download bzw. die Installation wie gewohnt durchgeführt werden.

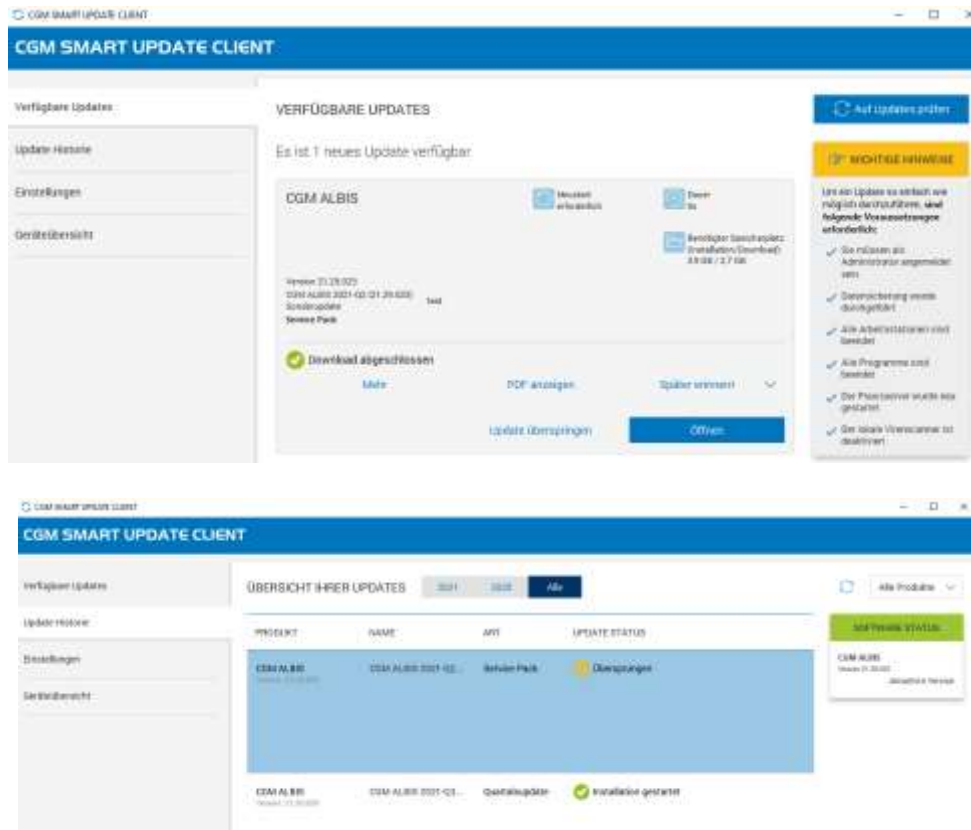

CompuGroup Medical Deutschland AG

Geschäftsbereich ALBIS

Maria Trost 23, 56070 Koblenz

info@albis.de

cgm.com/albis

